





Гольфы с хлопком для мужчин RELAXSAN – это линия изделий с распределенным давлением для профилактики и лечения варикозного расширения вен.

Изделия RELAXSAN – это результат многолетнего исследования. Они производятся на современном оборудовании в соответствии с Европейским стандартом качества CE на основании директивы 93/42 СЕЕ, как медицинские изделия. Все изделия CE сертифицированы.

Изделия RELAXSAN производятся из нитей очень высокого качества, не вызывая аллергии при соприкосновении с кожей и гарантируя длительный срок их использования.

Антибактериальный состав Sanitized обеспечивает длительное сохранение гигиенических свойств.

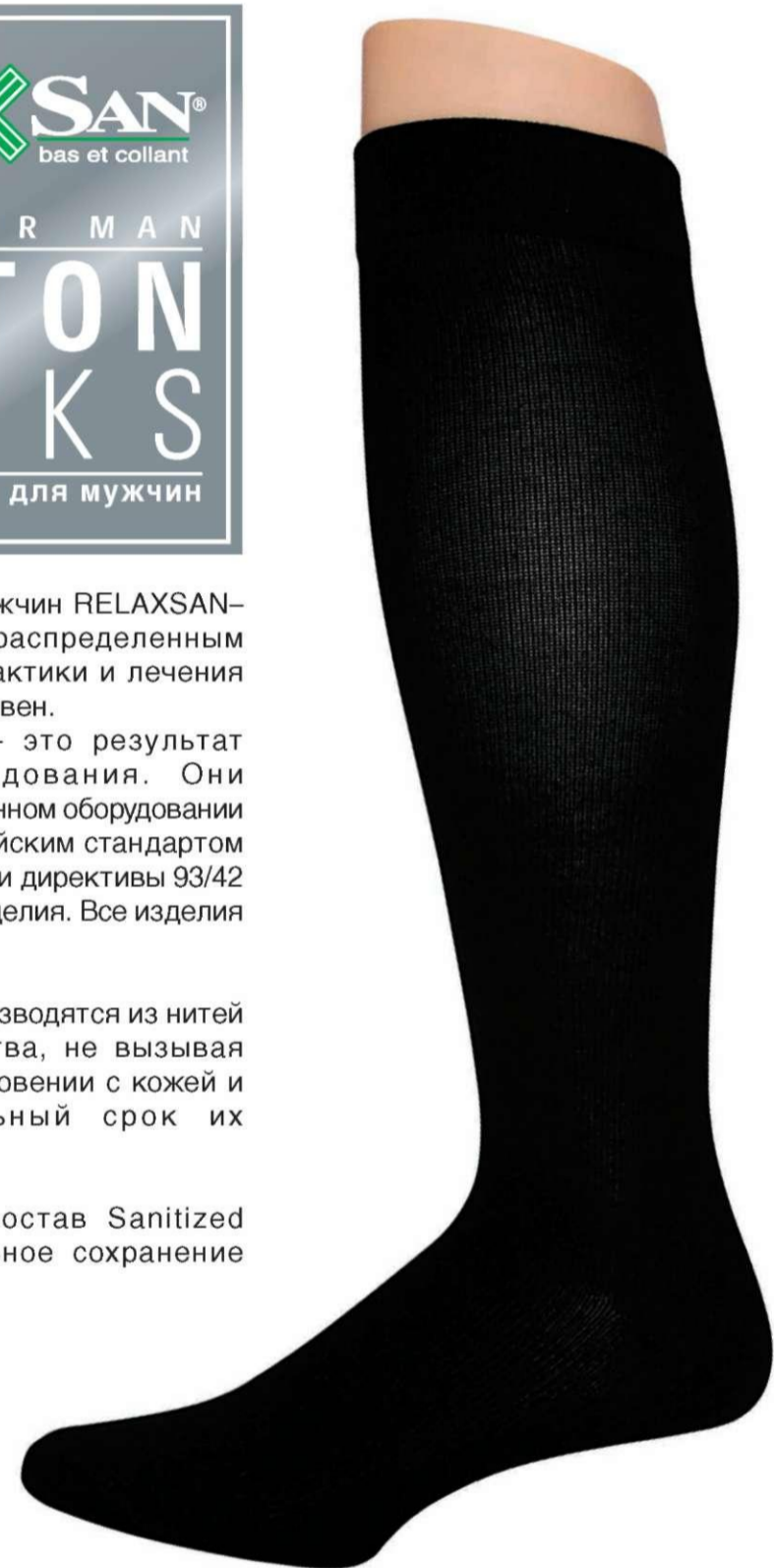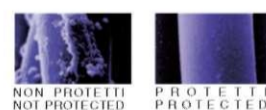

Модели:




Гольфы с хлопком для мужчин RELAXSAN 18-22 мм рт.ст.

Гольфы с хлопком для мужчин RELAXSAN 22-27 мм рт.ст.

Гольфы с хлопком для мужчин RELAXSAN с серебряной нитью X-Static 18-22 мм рт.ст.



Модель с серебряной нитью X-Static, помимо распределенного давления, обладает всеми ниже перечисленными преимуществами серебряной нити:

- 
**100% натуральная.**  
 Прочная, не токсичная, не содержит химических добавок и пестицидных остатков.
- 
**Предотвращает неприятные запахи.**
- 
 Имеет свойство **темопроводимости.**  
 Пропускает тепло: прохладная летом, теплая зимой.
- 
**Обладает лечебными свойствами.** Благодаря свойствам проводимости (серебро обладает высокой проводимостью) она хорошо влияет на здоровье, способствует правильному кровообращению.
- 
 Оказывает **антимикробное действие.** Убивает бактерии, вызывающие запах, и удаляет грибки со ступни.
- 
**Антистатичная**

Благодаря распределенному давлению, гольфы с хлопком RELAXSAN рекомендованы людям, у которых сидячая работа и тем, кто часто путешествует. Они способствуют кровообращению и помогают избежать отеков ног.



#### Категории давления:



**18-22 мм рт.ст.** – Давление рекомендовано для лечения начальных проявлений хронической венозной недостаточности, улучшения кровообращения в ногах, для снятия отеков ног.



**22-27 мм рт.ст.\*** – Давление рекомендовано при выраженных проявлениях варикозной болезни, после склеротерапии, для профилактики тромбоза глубоких вен.

\* Указанное давление создается на щиколотке и постепенно ослабевает по направлению вверх, гарантируя правильное кровообращение.

#### Как надевать гольфы с хлопком:



- 1 Аккуратно соберите гольф от эластичной резинки до носка.
- 2 Правильно зафиксируйте носок и пятку изделия на ноге.
- 3 Аккуратно натяните гольф от щиколотки до колена.
- 4 Окончательно распределите изделие по ноге, удалив любые складки

#### Таблица подбора размеров

Размер	2°	3°	4°	5°	6°
Русский	37-39	39 - 41	41 - 43	43 - 45	45 - 47
American	5 - 7	7 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14
British	4 - 6	6 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 13
Asian	23,5-25,5	25,5-26,5	26,5-28	28 - 30	30 - 32

Размер	Окружность щиколотки (см)
2	18-21
3	21-24
4	24-27
5	27-30
6	30-33

Гольфы с хлопком RELAXSAN зарегистрированы Министерством Здравоохранения Р.Ф. Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1957 от 27.12.2005 г.



Перед применением обязательно изучите инструкцию. Пройдены клинические испытания по направлению МЗ РБ на базе ГКБ №6 г. Минска и Минской областной клинической больницы.

Эксклюзивные дистрибьюторы G.T. Calze s.r.l. в Республике Беларусь ООО "Мульти Лаб" (Рег. удостоверение № ИМ-7.94885 от 28.11.08г. до 28.11.13 г.) 220037, г. Минск, ул. Филимонова, 13/1-21 тел./факс +375 17 2990902, +375 17 2999456 e-mail: info@relaxsan.by web: www.relaxsan.by



by  
Производство фирмы GT CALZE s.r.l. – Via W. Tobagi 17/21 – 46040 Casaloldo (MN) - Италия

